



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000



ЦЕНА

по запросу

Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки

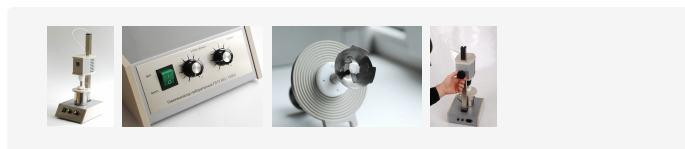

Описание

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 — предназначен для получения



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту. Предлагаем также ознакомиться с обзором [гомогенизаторов ГЛП](#).

Назначение

Эмульсификация смесей жиров, гомогенизация растворов и смесей жидкостей в целях получения репрезентативного образца.

Особенности

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10 000 отвечает требованиям ГОСТов: — **ГОСТ 31976-2012**. Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности — **ГОСТ 33926-2016**. Продукты молочные составные и молокосодержащие. Мороженое и смеси для мороженого. Определение массовой доли жира методом Вейбулла-Бернтропа.

Рабочий орган — ротор, может быть снабжен ножом с двумя или четырьмя областями. Нож изготовлен с такой геометрией, которая обеспечивает вихреобразование и подачу материала в зону измельчения.

Наличие полипропиленовой крышки с канавками препятствует разбрызгиванию образца, и позволяет работать с емкостями различного объема.

П-образный выступ на крышке ориентирует ее относительно стойки аппарата.

Характеристики

Максимальная скорость вращения	10 000 об/мин
Мощность двигателя не менее	400Вт



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Диапазон установки таймера	1 — 10 мин (с шагом 1 мин)
Рабочая емкость	нержавеющая сталь
Максимальный объем гомогенизируемого образца	до 1 л *
Электропитание	220В/50Гц
Габаритные размеры	580x290x220 мм
Масса	7,5 кг

* В базовой комплектации прибор оснащен тремя емкостями на 0.25 л., 0.5 л и 1л. По дополнительной заявке прибор может быть укомплектован и другими емкостями до 1.0 л.